


ハンディーマイクロホモジナイザー

# ヒスコトロン

## NS-310EII

簡便な操作性で少量サンプルも微破碎

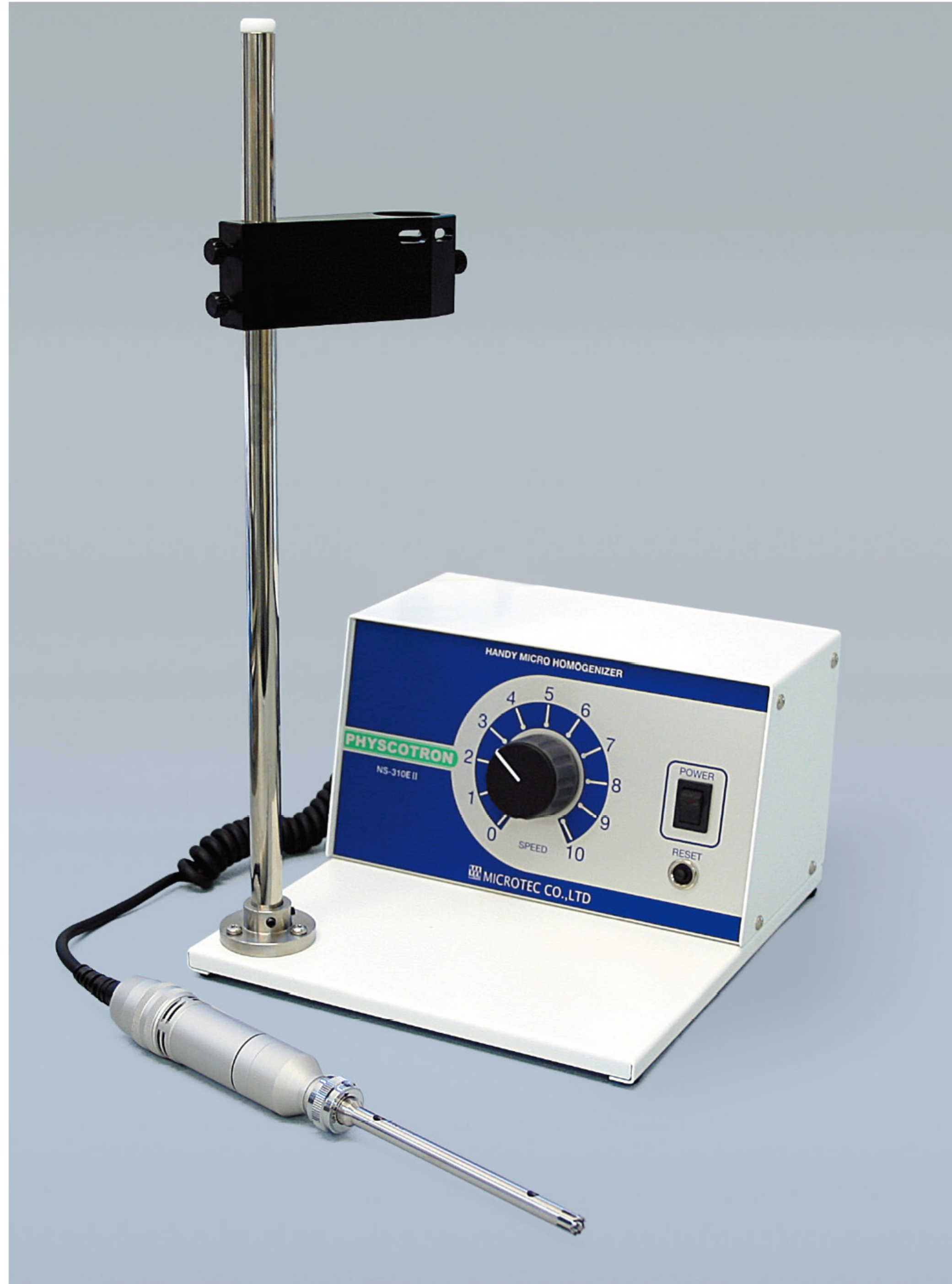

### 小型、軽量設計

小型、軽量ボディーで持ち運びも簡単です。

### 高回転設計

最高回転30,000rpmで、破碎しにくい試料も容易に破碎できます。

### 簡便な操作性

回転調整器を回すだけで、どなたでも簡単に操作できます。

### マイクロシャフト対応

マイクロシャフトNS-3・NS-4・NS-7に対応しています。  
微量のサンプルなども高精度で短時間、高い回収率で前処理に最適です。



MICROTEC CO.,LTD.

# 少量試料・軽量設計・簡便操作…

サンプル量1ml~5ml



- マウスや昆虫の臓器や脳などの微量サンプルの破碎
- エマルジョン化粧品・医薬品、乳飲料などの乳化
- 液中凝集物の解碎      ● 粉体材料の分散
- 液体・飲料などの均質化
- 植物・果物・藻類の微破碎



シャフト3本セット例(NS-3・NS-4・NS-7)  
お得な3本セットもご用意しました。  
3種類のシャフトから組み合わせは自由にお選びいただけます。



(実寸)

## 仕様

型式	NS-310EII
適応シャフト	マイクロシャフト NS-3・NS-4・NS-7
モーター	DCブラシモーター
回転数	3,500~30,000rpm
寸法/重量(本体)	200(W) × 220(D) × 110(H) mm
寸法/重量(モーター)	Φ24 × 12.6(L) mm (シャフト突起部含まず)
電源	AC100V(50/60Hz)

## ジェネレーターシャフト(ヒスコロン本体には必ず弊社純正の高精度ジェネレーターシャフトを組み合わせてお使い下さい。)

型式	NS-3	NS-4	NS-7
内容	極微量タイプ	微量タイプ	少量タイプ
シャフト径	Φ3.5×58mm	Φ4.5×80mm	Φ7.0×100mm
処理容量	0.05~2ml	0.1~5ml	0.5~50ml

ジェネレーターシャフトは他にも各種ございます。

詳しくはシャフトカタログをご覧くださいか、  
弊社営業窓口までお問合せ下さい。



## 特注対応・カスタマイズ

破碎装置を製造して40年のマイクロテック・ニチオンが培ったノウハウと実績で、お客様のご要望を1からお聞きして特注対応を致します。  
お客様の「こんな事がしたい」「このような機器が無くて困っている」というご要望をお待ちしております。



マイクロテック・ニチオンは2008年に創業20周年を迎えます。



株式会社  
**マイクロテック・ニチオン**

(本社) 〒274-0074 千葉県船橋市滝台2-16-5  
TEL:047(466)8186 FAX:047(466)8190  
(ラボ) 〒277-0882 柏市柏の葉5-4-6 東葛テクノプラザ内  
TEL・FAX:04(7137)5252

URL : <http://nition.com> mail : [microtec@nition.com](mailto:microtec@nition.com)