

静音型万能ホモジナイザー

NEW!!

ヒスコトロン

NS-57

静音タイプ

NS-57S

静音タイプ(電子タイマー・回転表示付)

環境に優しいホモジナイザー あらゆる分野で採用



モーター駆動音 60 デシベルの静音型

静かな乗用車、日常会話程度の静寂性。ホントに静かです。

タイマー & 回転数設定

タイマー付(NS-57S)なら運転時間をプリセット可能、同時に正確な実回転数の表示もできますので、GLP、GMP、SOPなどの品質管理にも役立ちます。

高周波モーターをインバーター制御

カーボンブラシを使わないブラシレスの高周波モーターを採用、インバーター駆動で加・減速もスムーズです。負荷の変動に左右されなく安定した回転を維持。

モーター保護機能付き


過負荷運転などにより起こる発熱によるモーター破損を防止するために温度センサーを内蔵しています。



MICROTEC CO.,LTD.

破碎・均質化・混合・分散・微破碎・乳化・懸濁・化合・反応… ヒスコトロンは、さまざまな分野でお使いいただけるホモジナイザーです。

- 基礎医学 …皮膚、心筋、内臓組織、細胞(DNA、RNAの抽出)
- 農林水産 …穀類、種子、果物、葉、茎、根、動物組織の破碎
- 食 品 …分析の前処理(肉・魚等)開発、検査、品質管理
- 電気電子 …磁性体の分散、新素材の製造・研究
- 化学製品 …乳化剤、顔料系の製造・研究
- 環 境 …汚泥の均一化、分散
- 微生物系 …培養微生物の分散・破碎
- 医 薬 品 …錠剤の破碎、ワクチン・酵母の精製

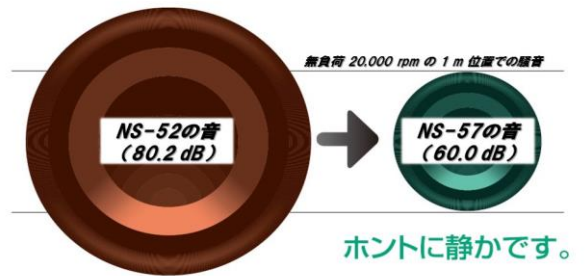

仕 様

NS-57	
回転数	1,000~24,000rpm
寸 法	360 _W ×280 _D ×640 _H mm
重 量	16kg
電 源	AC100V 50/60Hz
出 力	300W

NS-57S	
回転数	1,000~24,000rpm
寸 法	430 _W ×280 _D ×640 _H mm
重 量	17kg
電 源	AC100V 50/60Hz
出 力	300W

実回転表示・タイマー設定付き

ジェネレーターシャフト(ヒスコトロン本体には必ず弊社純正の高精度ジェネレーターシャフトを組み合わせてお使い下さい。)

型 式	NS-10	NS-20	NS-30U
内 容	少量タイプ	万能タイプ	乳化タイプ
シャフト径	Φ10.5×140mm	Φ20×200mm	Φ32×220mm
処理容量	1~250ml	5~2000ml	50~3000ml

ジェネレーターシャフトは他にも各種ございます。

詳しくはシャフトカタログをご覧ください。弊社営業窓口までお問い合わせ下さい。



特注対応・カスタマイズ

破碎装置を製造して40年のマイクロテック・ニチオンが培ったノウハウと実績でお客様のご要望を1からお聞きして特注対応を致します。お客様の「こんな事がしたい」「このような機器が無くて困っている」というご要望をお待ちしております。

■ご不明な点やご質問などがございましたら弊社営業部(下記)までお問い合わせください。■改良の為に製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。



株 式 会 社
マイクロテック・ニチオン

〒274-0074 千葉県船橋市蒲台2-16-5
TEL:047(466)8186 FAX:047(466)8190
URL: <http://niton.com> mail: microtec@niton.com